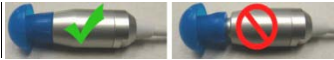


Quick Reference Guide – ERO•SCAN

Powering the Unit

1. Press **DOWN ARROW**↓ to turn unit **ON**.
2. The test will default to the last protocol selected.
3. Press and hold **UP ARROW**↑ to turn unit **OFF**.

Placing the Probe

1. Make sure ear canal is clear of debris.
2. Select a colored silicone eartip and place on probe tube, fully seating it on the probe.

3. Insert probe in the ear. Probe should remain in place without hand-holding.

Changing the Probe Tube

NOTE: Probe tubes do NOT have to be changed for every test, but may need to be replaced if clogged.

1. To remove probe tube, flip eartip up and use to grip tube.



2. Twist slightly and pull tube straight out of probe head.
3. Insert a new probe tube into the probe head until it is fully seated.



Conducting a Test

1. Press **CHANGE**↓ to select a different protocol.



2. Press **CHANGE**↔ to scroll to desired protocol.




3. Press **UP ARROW**↑ to return to test screen.
4. Press **<L** or **R>** to select test ear and begin test.



5. Probe Check will appear on screen. The scale should be in the green area. If the scale is in the amber area, reposition the probe in the ear.



6. Test will automatically start once probe check is acceptable.

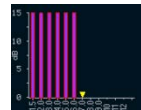

7. When test is finished, Press **<L** or **R>** to test the other ear, or press **REVIEW**↓ to review results graph.



NOTE: "Pass" or "Refer" will only be displayed if set in protocol.

Printing Test Results via Ero•Scan Database

1. Open ERO•SCAN Database on PC.
2. Connect ERO•SCAN unit to computer via included USB/micro-USB cord.
3. Make sure ERO•SCAN unit is turned on.
4. "Waiting on PC" will display on ERO•SCAN screen.
5. If this is a new or different ERO•SCAN device,

click **"Detect Com Port"**.



6. Click **"Results"**.
7. Results in the ERO•SCAN unit will download to database.
8. Select the results you would like to print

Result						Equipment	
Test #	Ear	Test Date	Outcome	Protocol	Tester	Notes	Instrument SN. Probe
2	Left	3/4/2012 1:27:15 PM		DP 1.6-8.0			ME3000001 MEdemo35
1	Right	3/4/2012 1:26:06 PM		DP 1.6-8.0			ME3000001 MEdemo35
4	Left	3/4/2012 1:44:21 PM	PASS	DP 2.0-5.0			ME3000001 MEdemo35
3	Right	3/4/2012 1:43:51 PM	PASS	DP 2.0-5.0			ME3000001 MEdemo35
14	Right	3/5/2012 10:08:17 AM	PASS	DP 2.0-5.0			ME3000001 MEdemo35

9. Click **"Print"**.



NOTE: For additional functions and instructions on using the ERO•SCAN database, please see the included **Database Operation Manual**.

NOTE: For additional information on how to print to the optional Bluetooth thermal printer, please see the included **ERO•SCAN Operation Manual**.

Guía de referencia rápida – ERO•SCAN

Cómo encender la unidad

1. Oprima la **FLECHA HACIA ABAJO** ↓ para encender la unidad.
2. La prueba se realizará de acuerdo con el último protocolo seleccionado.
3. Oprima y mantenga oprimida la **FLECHA HACIA ARRIBA** ↑ para apagar la unidad.

Colocación de la sonda

1. Asegúrese de que el conducto auditivo esté libre de suciedad.
2. Seleccione una punta auricular de silicona de color y colóquela en el tubo de sonda, de manera que quede completamente asentada en la sonda.



3. Inserte la sonda en el oído. La sonda debe permanecer en su lugar sin tener que sostenerla con la mano.

Cambio del tubo de sonda


NOTA: Los tubos de sonda NO tienen que cambiarse para cada prueba, pero es posible que haya que reemplazarlos si se obstruyen.

1. Para sacar el tubo de sonda, voltee la punta auricular hacia arriba y úsela para agarrar el tubo.
2. Tuerza ligeramente y tire del tubo directamente hacia afuera de la cabeza de la sonda.
3. Inserte un tubo de sonda nuevo en la cabeza de la sonda hasta que quede completamente asentado.



Cómo realizar una prueba


8. Oprima **↓CHANGE** (cambiar) para seleccionar un protocolo diferente.

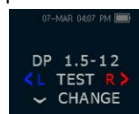

9. Oprima **←CHANGE→** para desplazarse al protocolo deseado.




10. Oprima la **FLECHA HACIA ARRIBA** ↑ para regresar a la pantalla de prueba.
11. Oprima **←L o R→** (izquierdo o derecho) para seleccionar el oído que se va a examinar y comenzar la prueba.

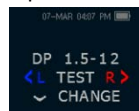


12. Probe Check (verificación de la sonda) aparecerá en la pantalla. La escala debe estar en el área verde. Si la escala está en el área ámbar, reposicione la sonda en el oído.



13. La prueba comenzará automáticamente una vez que la verificación de la sonda sea aceptable.

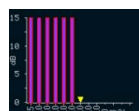

14. Cuando la prueba termine, oprima **←L o R→** para examinar el otro oído, u oprima **↓REVIEW** para revisar la gráfica de resultados.

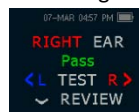

NOTA: “Pass” (pasar) o “Refer” (referir) solo se mostrará si se establece en el protocolo.

Cómo imprimir los resultados de la prueba a través de la Base de Datos del Ero•Scan

1. Abra la Base de Datos del ERO•SCAN en la PC.
2. Conecte la unidad ERO•SCAN a la computadora con el cable USB/micro-USB incluido.
3. Asegúrese de que la unidad ERO•SCAN esté encendida.
4. “Waiting on PC” (esperando por la PC) aparecerá en la pantalla del ERO•SCAN.
5. Si éste es un dispositivo ERO•SCAN nuevo o diferente, haga clic en “Detect Com Port” (detectar puerto).



6. Haga clic en “Results” (resultados).
7. Los resultados en la unidad ERO•SCAN se descargarán a la base de datos.
8. Seleccione los resultados que desea imprimir.



Result							Equipment	
Test #	Ear	Test Date	Outcome	Protocol	Tester	Notes	Instrument SN	Probe
2	Left	3/4/2012 1:27:15 PM		DP 1.6-8.0			ME3000001	MEdemo35
1	Right	3/4/2012 1:26:06 PM		DP 1.6-8.0			ME3000001	MEdemo35
4	Left	3/4/2012 1:44:21 PM	PASS	DP 2.0-5.0			ME3000001	MEdemo35
3	Right	3/4/2012 1:43:51 PM	PASS	DP 2.0-5.0			ME3000001	MEdemo35
14	Right	3/5/2012 10:08:17 AM	PASS	DP 2.0-5.0			ME3000001	MEdemo35



9. Haga clic en “Print” (imprimir).

NOTA: Para obtener funciones e instrucciones adicionales sobre cómo usar la base de datos del ERO•SCAN, consulte el **Manual de operación de la base de datos** que se incluye.

NOTA: Para obtener información adicional sobre cómo imprimir en la impresora térmica Bluetooth opcional, consulte el **Manual de operación del ERO•SCAN** que se incluye.